

Overzicht High End hoortoestellen

Beter verstaan en minder luistermoeheid

Elke nieuwe generatie High End hoortoestellen heeft weer meer rekenkracht en is daarmee in staat de omgeving nauwkeuriger in kaart te brengen en zich daaraan aan te passen. Die rekenkracht is ook nodig om de nieuwste audiologische inzichten te kunnen toepassen in de hoortoestellen.

Met de grote rekenkracht in High End hoortoestellen is het ook mogelijk de verschillende eigenschappen, zoals lawaaireductie, spraakherkenning, directionaaliteit en compressie beter op elkaar af te stemmen. Ook zijn in hoortoestellen de afgelopen jaren technieken geïmplementeerd zoals artificiële intelligentie, Machine Learning en ook de inzet van Deep Learning. Ook hiermee zijn de instellingen beter aan te passen aan de geluidsomgeving. Tot nu toe heeft elke nieuwe generatie hoortoestellen tot beter verstaan in geroezemoes geleid en ook blijkt luisteren met de nieuwste High End hoortoestellen minder moeite te kosten. Het hoge innovatietempo is vergelijkbaar met smartphones.

Nieuwe intelligente technieken

De afgelopen jaren zijn hoortoestellen steeds intelligenter geworden. De toepassing van artificiële intelligentie bij het kiezen van de meest optimale instelling van het hoortoestel bestaat al langer. Daarna werd Machine Learning ingezet om patronen in de luistersituaties te herkennen en de instellingen zo goed als mogelijk aan te passen en aan te bieden aan het oor van de drager. Met de komst van internet en van zogeheten ‘cloud computing’ en ook betere algoritmes is het nu mogelijk om niet van enkele honderden luistersituaties gebruik te maken bij het kiezen van de meest optimale instelling maar van miljoenen! De inzet van Deep Learning of wel het leren met behulp van Deep Neural Networks (DNN) is ook in de hoortoesteltechniek door gebruik te maken van de ‘cloud’ mogelijk geworden. De DNN-techniek wordt ook

gebruikt voor spraakherkenning en sinds de toepassing daarvan is dit met grote stappen vooruitgegaan.

Communicatiemogelijkheden door streaming

Daarnaast nemen de communicatiemogelijkheden (streaming) met mobiele telefoons, computers, tv en hifi steeds verder toe. Ook de stabiliteit van de verbinding zijn steeds beter en de (Bluetooth) techniek energiezuiniger. Ook is de geluidskwaliteit steeds beter geworden, door de snelheid van de geluidsbewerking en doordat de hoortoestellen een betere dynamiek hebben en breedbandiger zijn. Hierdoor is ook het ruimtelijk horen sterk verbeterd. Hoge tonen boven de 8000 Hz blijken niet alleen belangrijk voor het verstaan van spraak, maar ook voor het kunnen plaatsen van geluiden in de ruimte.

Direct of via streamer

Alle High End hoortoestellen kunnen vandaag de dag communiceren met bijvoorbeeld de iPhone en Android smartphones. Bij sommige gaat dit direct bij anderen types is er een klein kastje voor nodig. Dat wordt een 'streamer' genoemd.

Bij steeds meer hoortoestellen wordt de microfoon van het hoortoestel zelf gebruikt bij het telefoneren. De telefoon kan zo bij het bellen dan in de zak of tas blijven zitten. Opnemen van de telefoon gebeurt door het drukken op een knopje van het hoortoestel of door erop te tikken ('tap control').

Bij het telefoneren kan de drager kiezen of de stem van de spreker aan één kant of voor een optimale verstaanbaarheid aan beide kanten wordt gehoord.

Ook muziek kan op dezelfde manier worden beluisterd.

Ondertussen zijn ook binnen de vergoede zorg aardig wat hoortoestellen verkrijgbaar waarmee het mogelijk is te telefoneren en ook muziek naar over te sturen.

Instellingen hoortoestel op afstand aanpassen

De meeste High End hoortoestellen kunnen door de audicien op afstand bijgesteld worden, zodat voor een fijnafstelling geen bezoek nodig is aan de audicien.

High End hoortoestellen: geen luxe

Hoortoestellen kunnen het verloren hoorvermogen bij een zogeheten perceptief gehoorverlies voor een groot deel compenseren, maar veelal niet voor de volle honderd procent. Hoortoestellen kunnen immers niet herstellen wat er in het slakkenhuis van het oor kapot is gegaan. Hoortoestellen zijn wat dat betreft niet te vergelijken met een bril. Een bril corrigeert relatief eenvoudige afwijkingen bij de bolling van de lens en dát is veelal wel voor 100% corrigeerbaar. Schade in het slakkenhuis is echter te vergelijken met schade aan het netvlies in het oog. En een bril kan niet corrigeren wat er misgaat bij het netvlies. Het is dan ook raadzaam om alle opties om het hoorvermogen te verbeteren aan te grijpen. Soms kan dit resulteren in een beter verstaan van spraak, de andere keer in meer luistercomfort of minder luisterinspanning. Wat namelijk blijkt is dat slechthorenden vaak sneller moe zijn door de inspanning die zij moeten leveren om te horen en te verstaan. Soms worden High End hoortoestellen afgeschilderd als luxe, als rijden in een dure auto. Dit vergelijk gaat alleen op als een minder geavanceerd hoortoestel het gehoorverlies al volledig weet te compenseren, zodat iemand weer precies zo hoort als voorheen voordat het gehoorverlies was ontstaan. Of dit haalbaar is, is onder meer afhankelijk van het gehoorverlies, de taken die moeten worden uitgevoerd, de omgevingen waarin gefunctioneerd moet worden (onder meer akoestiek) en de beperking die in verschillende situaties wordt ervaren.

High End hoortoestellen alleen in vrije markt

De nieuwste High End hoortoestellen zijn helaas alleen beschikbaar in de vrije markt en worden slechts onder strikte voorwaarden vergoed door de zorgverzekeraar.

Dit komt doordat de prijzen binnen de verzekerde zorg voor hoortoestellen sinds 2013 steeds lager zijn geworden. Hierdoor passen High End hoortoestellen qua prijsniveau niet meer binnen de verzekerde zorg.

Niet bij alle audiciens verkrijgbaar

Verderop in dit artikel worden de innovaties van de A-merken in Nederland beschreven. Niet alle audiciens leveren overigens deze merken en types, of leveren slechts een aantal merken daarvan. Dit kan zijn omdat bepaalde audiciensbedrijven verbonden zijn aan bepaalde fabrikanten, zij een zogeheten private-label merk leveren (huismerk) of doordat audiciensbedrijven om wille

van inkoopvoordeel slechts een beperkt aantal merken leveren. Deze laatste tendens komt door de prijsdruk die ontstaan is na de invoering van de functiegerichte aanspraak op hoortoestellen in 2013 waarbij hoortoestellen in vijf categorieën worden ingedeeld en door aanbestedingen van zorgverzekeraars de vergoedingen voor de verstrekking van hoortoestellen door audiciens herhaaldelijk zijn gedaald.

Onderling vergelijken op grond van alleen technische data lastig

High End hoortoestellen zijn technisch gezien onderling lastig te vergelijken. De implementatie van één en dezelfde techniek kan per merk verschillen en daardoor bij het ene merk beter zijn dan bij het andere. Daarnaast zal bij het ene merk samenwerking tussen verschillende technieken anders verlopen, waardoor het eindresultaat voor iedere slechthorende op individueel niveau anders kan zijn. Daarnaast is het moeilijk te bepalen of de ene toepassing van artificiële intelligentie, Machine Learning of DNN beter is dan de andere. Ook spelen persoonlijke geluidsvoorkeuren een rol en ook gewenning aan een bepaalde manier van verwerking van geluid met eerdere hoortoestellen heeft invloed op de voorkeur.

Meerwaarde bepalen door zelf uittesten

Of een High End hoortoestel meerwaarde voor u heeft, kunt u bepalen door zo'n toestel zelf uit te testen en te vergelijken met een hoortoestel dat binnen de vergoede zorg valt. Of u meerwaarde ervaart hangt af van uw gehoorverlies, de omstandigheden waarin u het hoortoestel gebruikt en natuurlijk ook aan de eisen die u eraan stelt.

High end toestellen op alfabetische volgorde op een rij

Op de volgende pagina's worden de High End hoortoestellen van de zes grootste spelers wereldwijd op een rij gezet. Dit gebeurt op alfabetische volgorde. Aan deze volgorde zit dus geen oordeel gekoppeld. Door deze hoortoestellen uit te testen bij een audiciensbedrijf kunt u weten komen of deze High End hoortoestellen meerwaarde voor u hebben en welk type hoortoestel voor u geschikt is.

Oticon Real

De Deense hoortoestelfabrikant Oticon introduceert met de Oticon Real™ het eerste hoortoestel waarmee de gebruiker de echte geluiden van het leven terugkrijgt. Twee nieuwe functies in de hoortoestelfamilie, SuddenSound Stabilizer en Wind & Handling Stabilizer, helpen erbij om de hele geluidsomgeving beschikbaar te houden. Deze functies zorgen er specifiek voor dat het storende effect van wind, en van het aanraken van hoortoestellen wordt gedempt waardoor er minder irritatie is bij de gebruiker. Ook wordt er afgerekend met storende plotselinge geluiden. Dit zijn welbekende problemen voor vele hoortoestelgebruikers. Oticon brengt een revolutionaire verandering in de levens van gebruikers door deze klachten aan te pakken en te zorgen dat gebruikers contact kunnen houden met de wereld om hen heen. Wind & Handling Stabilizer is een functie die tot wel 500x per seconde wind- en bedieningslawaaï detecteert, en dit kan uitschakelen zodat het storende effect van wind en het aanraken van de hoortoestellen, wordt afgezwakt. SuddenSound Stabilizer zorgt voor een balans van plotselinge geluiden. Hierdoor kost het de gebruiker minder inspanning om goed te kunnen luisteren. Tegelijkertijd gaat het niet ten koste van de helderheid van spraak en kunnen gebruikers betrokken blijven bij hun omgeving.

*Taco Drok hoofd
audiologie bij Oticon:*


*‘De Oticon Real zorgt
ervoor dat mensen
scherp kunnen blijven
in de echte wereld.’*

Ervaar de geluiden van de echte wereld

Oticon Real is gebouwd op een revolutionair nieuw chipplatform Polaris R, met nieuwe detectoren voor een snelle en optimale verwerking van storende geluiden. Real maakt ook gebruik van het Oticon kenmerkende Deep Neural Network (DNN) zodat geluiden makkelijker te onderscheiden zijn van elkaar en er naadloos samengewerkt kan worden met verschillende geluidsomgevingen. Dit DNN is getraind met 12 miljoen unieke, levensechte geluidsscènes, waardoor het kan functioneren zoals de hersenen dat op natuurlijke wijze doen. Hierdoor kunnen hoortoestelgebruikers de volledige geluidsscène ervaren waardoor de echte wereld open is. Alles horen wordt met Oticon Real weer normaal.

Opties en accessoires Oticon Real

- Met Bluetooth® Low Energy technologie is Oticon Real een Made for iPhone toestel, en geschikt voor compatibele Android™ toestellen met gebruik van het ASHA protocol.
- Oticon Real kan vanaf ieder ander Bluetooth toestel streamen met de discrete ConnectClip.
- Oticon Real is verkrijgbaar in vier uitvoeringen, negen kleuren en drie prestatieniveaus.
- De Oticon Real miniRITE R is oplaadbaar en biedt een hele dag stroom, zelfs bij het gebruik van streaming, na slechts drie uur opladen
- Bij Oticon Real zijn twee chargers verkrijgbaar, een Desk Charger voor thuis, en een SmartCharger die een powerbank bevat en de toestellen onderweg nog drie keer volledig op zou kunnen laden.
- Hoortoestelgebruikers hebben met de vernieuwde alles-in-een Oticon Companion app toegang tot handige en intuïtieve manieren om de hoortoestellen te bedienen via hun smartphone. Ook is er de mogelijkheid om op afstand te verbinden met de hoorzorgprofessional en ondersteuning te ontvangen.
- TV Adapter: Gebruik de TV Adapter om het geluid rechtstreeks van de tv naar de hoortoestellen te streamen.
- Afstandsbediening: Wijzig het volume, wissel van programma of demp de toestellen met één knop.

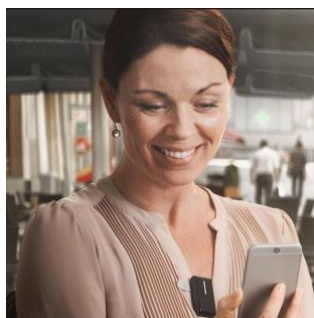

Ga voor meer informatie naar www.oticon.nl

Voor meer informatie: www.oticon.nl

Phonak Lumity serie

Het Zwitserse merk Phonak staat bekend om het uitstekende spraakverstaan in uiteenlopende situaties en de volledig automatische programma activatie. Dat laatste geeft een groot gemak omdat de gebruiker er geen omkijken meer naar heeft. De nieuwe Phonak Lumity hoortoestellen zijn een doorontwikkeling van de succesvolle platformen Phonak Marvel en Phonak Paradise. Ten opzichte van deze voorgaande platformen is bij Lumity op het gebied van spraakverstaan significante vooruitgang geboekt. Met Lumity is de slechthorende drager dus verzekerd van topkwaliteit. Uitzonderlijke geluidskwaliteit door onder andere SmartSpeech™ technologie wordt gecombineerd met groot gebruiksgemak en unieke universele Bluetooth connectiviteit voor directe koppeling met smartphones, tablets en TV. Een los streamerkastje om de hals is daardoor definitief verleden tijd.

Telefoongesprekken en muziek worden direct naar de hoortoestellen gestreamd vanaf smartphone, tablet en tv en meer. De geluidskwaliteit van de direct streaming wordt als beste beoordeeld in consumententesten (DELTA SenseLab Denemarken, 2018, Legarth, Latzel & Rodrigues). De ingebouwde Bluetooth is universeel, het kan met alle merken mobiele telefoons direct koppelen, zoals met Android™ en iPhone® telefoons. Maar ook klassieke GSM's (niet-smartphone). Phonak is daarmee de eerste fabrikant die een universele oplossing biedt voor mobiel telefoneren met directe Bluetooth koppeling. Uniek hierbij is de handsfree functie: de telefoon blijft gewoon in de jas of tas: het Lumity hoortoestel vangt de spraak op en stuurt het via Bluetooth naar de telefoon door. Telefoneren verloopt zo volledig via het hoortoestel zelf. Accepteren van het gesprek gaat met een druk op het knopje van het Lumity hoortoestel of via een dubbel-tikje op uw oorschelp (Tap Control). Lumity is alleen als oplaadbaar hoortoestel verkrijgbaar.

*Roy Peters Marketing
Manager bij Phonak
over de Lumity serie:*

*“Lumity laat
gesprekken weer
helder klinken”*

Opties en randapparatuur

- Beschikbaar als speaker-in-het-oor toestel (voor lichte tot zware gehoorverliezen)
- Oplaadbare lithium-ion accu gaat een volle dag mee, levensduur 6 jaar (tussentijds vervangen niet nodig!) Geen gepriegel met batterijtjes en nooit meer onverwacht een lege batterij. Door afwezigheid batterijlade is het model kleiner en minder vatbaar voor reparaties, immers zit de accu volledig opgesloten in de kast.
- Mobiel telefoneren: directe Bluetoothkoppeling maken met alle merken telefoons (Android, iOS etc.). Hoor het gesprek op beide oren. Unieke mogelijkheid om met twee mobiele apparaten tegelijk verbonden te zijn voor snel wisselen. Ook handsfree bellen mogelijk doordat hoortoestellen uw eigen stem opvangen. Gesprek accepteren/starten mogelijk via Tap Control (dubbel tikje op uw oorschelp).
- Huistelefoon: Ook Bluetooth koppeling vaste lijn mogelijk (Siemens Gigaset DECT)
- Speciale TV adapter (TV-Connector) voor draadloos luisteren TV in stereo-kwaliteit.
- myPhonak App voor afstandsbediening via uw eigen smartphone: programmakeuze, volume per oor regelbaar, balansregeling tussen streaming (zoals TV) en hoortoestelmicrofoon (omgeving, bijvoorbeeld uw partner). Een losse afstandsbediening is ook mogelijk.
- Door de Tap Control is een dubbel tikje op uw oorschelp genoeg om een inkomend telefoongesprek te accepteren, muziek te pauzeren of spraakassistent (Siri, Google Assist) te starten.
- Filter zelf ter plekke hinderlijk omgevingslawaai extra weg met de Ruisreductie en Spraakfocus regelaars in de myPhonak app.
- Bijstellen op afstand door uw audicien mogelijk
- Ringleiding (T)-stand voor openbare ruimten (niet alle modellen)
- Extra bescherming tegen vocht, zoals transpiratie (Life model)
- Uitbreidbaar met Roger solo-apparatuur voor nog beter spraakverstaan in drukke gezelschappen of over grote afstand (losse richtmicrofoon die spraak opvangt en draadloos naar uw hoortoestel doorstuurt). Ideaal op een verjaardag, een restaurant of op de fiets, of als vergaderoplossing voor personen die nog werkzaam zijn. Ook handig om een partner met zwakke stem in de thuisituatie goed te verstaan op grotere afstand



Voor meer informatie: www.phonak.nl

Signia van Sivantos

Signia is één van de jongste hoortoestelmerken op de markt. Het merk bouwt voort op 140 jaar geschiedenis onder de merknaam Siemens. Signia staat bekend om haar wereldwijde innovaties en de vele patenten voor nieuwe technologieën. Gehoorverlies mag voor volgens de fabrikant geen beperking zijn: bij Signia gaat het niet alleen om beter verstaan, maar ook om beter te horen dan ooit tevoren. Om zo goed mogelijk te presteren is elk woord en elk geluid dan ook belangrijk. Want een gemist woord kan een gemiste kans betekenen. Signia biedt unieke modellen aan die het stigma op hoortoestellen doorbreken. De Styletto is een echte eyecatcher die gezien mag worden en de Silk is een onzichtbare oplossing die direct kan worden aangepast in het oor.

*Productspecialist
Benjamin den Heijer:*

“Signia biedt toonaangevende hooroplossingen, excellente geluidskwaliteit met direct streaming en de audicien in binnen handbereik via de myHearing app.”

De meest recente productlijn van Signia is gebaseerd op het X platform (afkorting voor Xperience). Dit platform beschikt over akoestische- en bewegingssensoren. Hierdoor krijgen hoortoestellen als het ware een nieuw ‘zintuig’ dat begrijpt wat de drager werkelijk wil horen. Hierbij helpen de bewegingssensoren in de hoortoestellen, zodat het geluid direct wordt aangepast aan de veranderende omgeving. Het eigen stemgeluid is bij veel hoortoesteldragers onnatuurlijk en veel te luid. Signia maakt gebruik van Own Voice Processing, een technologie die de eigen stem compleet apart van alle andere geluiden verwerkt. Hierdoor klinkt de eigen stem natuurlijk en comfortabel. Met de Signia Assistant in de Signia app neemt u uw persoonlijke assistent overal mee naartoe. Zo maakt u zelf direct een nieuwe instelling voor uw hoortoestellen. Dit gebeurt op basis van Artificiële Intelligentie: het systeem maakt gebruik van een Deep Neural Network en leert van alle hoortoesteldragers wereldwijd. Signia X biedt ook diverse opties voor mensen die last hebben van tinnitus. Er zijn verschillende afleidende ruisgeluiden instelbaar, vier verschillende oceaangeluiden en de unieke Tinnitus Notch therapy speciaal voor mensen die een zuivere toon als tinnitus ervaren.

Opties en accessoires

- Beschikbaar in een compleet aanbod aan uitvoeringen en een uitgebreid aanbod aan oplaadbare hoortoestellen.
- Telefoneren met uw smartphone gaat direct met iPhone (Made for iPhone).
- De StreamLine Mic is te gebruiken als handsfree streamer van audio en telefoongesprekken naar uw hoortoestellen. Daarnaast is deze accessoire inzetbaar als remote microfoon voor situaties zoals vergaderingen en lezingen waarbij de drager extra ondersteuning nodig heeft.
- Voor TV is de StreamLine TV te gebruiken. Hiermee ontvangt de drager het TV geluid in Dolby Digital kwaliteit direct in de hoortoestellen.
- De miniPocket is een zeer compacte afstandsbediening.
- Met de Signia app kunt u zelf uw hoortoestellen uitgebreid bedienen.
- Via de Signia app zijn de hoortoestellen ook op afstand bij te regelen door de audicien.



Voor meer informatie kijk op: <https://www.signia.net/nl-nl/> en voor bedrijven waar de Signia hoortoestellen zijn te verkrijgen: klik [hier](#).

ReSound ONE™

Hoor als geen ander

Het Deense ReSound wil er met haar toptoestellen voor zorgen dat iedereen weer kan verstaan wat hij of zij wil verstaan en ondertussen de geluidswereld beleeft op de meest natuurlijke wijze; zij noemen dat “Organic Hearing”. De ReSound ONE biedt Ultra Focus: op ingenieuze wijze bewerken het linker en rechter toestel het geluid, sturen dat indien nodig naar elkaar door, creëren daarmee een krachtig directioneel patroon en geven daarmee in zeer lawaaiige situaties alle focus aan de spreker waarmee u in gesprek bent.

Natuurlijke geluidskwaliteit

De natuur heeft de vorm van het oor ontworpen om de geluiden eromheen perfect vast te leggen. En omdat de vorm van het oor uniek is voor elk individu, is het geluid dat ze horen uniek voor hen. Helaas is dit bij het dragen van hoortoestellen niet altijd het geval, omdat de meeste apparaten het geluid alleen op of achter het oor opvangen. Dit is niet wat de natuur volgens ReSound voor ogen heeft, waardoor geluid uiteindelijk onnatuurlijk en onvolledig kan aanvoelen. ReSound brengt hier met ReSound ONE met M&RIE (Microfoon en Receiver-In-The-Ear) verandering in.

ReSound ONE met M&RIE is een nieuwe en unieke klasse hoortoestellen die de twee traditionele microfoons combineert met een derde die discreet in de gehoorgang zit als geïntegreerd onderdeel van de receivermodule. Hiermee kunnen hoortoestel dragers het volledige geluid opvangen - precies zoals de natuur het bedoeld heeft. Deze doorbraak wordt mogelijk gemaakt door een gloednieuwe chipset voor geluidsverwerking en feedbackmanagement. ReSound gelooft dat ReSound ONE de hersenen alles geeft wat het nodig heeft om geluid met meer diepte en richting te verwerken, waardoor u moeiteloos kunt genieten van alle geluiden en alle gesprekken - in elke situatie.

Dat is nog niet alles...

- Uniek ergonomisch RIE-design in een reeks kleuren die naadloos aansluiten bij haar- en huidtinten, die laag op het oor zitten om het gehoorcomfort te verbeteren en de juiste plaatsing van de microfoons te garanderen voor geweldige hoorprestaties.
- All Access Directionaliteit past directionele microfoonpatronen aan om u in de beste positie te brengen om te horen wat belangrijk is - en toch de geluiden om u heen te bewaken.
- Ongeëvenaarde oplaadbaarheid, geeft u het vermogen om uw toestel zorgeloos de gehele dag te gebruiken.
- Draadloze connectiviteit stelt u in staat om oproepen, muziek en andere audio rechtstreeks naar uw toestellen te streamen vanaf iPhone en iPad of Android-smartphones™¹ met behulp van Bluetooth® Low Energy.
- Handsfree bellen en FaceTime-gesprekken voeren is nu mogelijk voor iPhone en iPad² - met een simpele druk op de knop op het toestellen beantwoordt u de oproepen.
- Met de ReSound Smart 3D-app kunt u uw geluid bedienen en personaliseren – en zelfs contact opnemen met uw hoorspecialist voor hulp op afstand via ReSound Assist.™
- Veelzijdige reeks draadloze accessoires, waaronder de MultiMic en TV Streamer, geven u nog meer opties om verbinding te maken met de geluiden waar u elke dag van geniet.



*Mark Bakkum
(Clinical Business &
Portfolio Manager)
over de ReSound
ONE:*

*“Gesprekken volgen
én al het geluid om
je heen ervaren
zoals het hoort, wat
wil je nog meer?”*

ReSound ONE is verkrijgbaar in RIE- en AHO³-modellen. Ga voor meer informatie naar www.resound.com

¹ Controleer de compatibiliteit van uw apparaat op resound.com. ²ReSound ONE handsfree bellen is compatibel met iPhone 11 of hoger, iPad Pro 12,9-inch (5e generatie), iPad Pro 11-inch (3e generatie), iPad Air (4e generatie) en iPad mini (6e generatie), met software-updates iOS 15.3 en iPadOS 15.3 of hoger. ³M&RIE-receiver is niet beschikbaar bij ReSound ONE AHO-modellen.

Starkey Evolve AI

Het nieuwste hoortoestel van Starkey is de Starkey Evolv AI. Het is de opvolger van de Livio AI serie, wat het eerste hoortoestel is de mentale en fysieke gezondheid van de drager volgt en registreert. Het hoortoestel beschikt daarvoor over biosensoren en kunstmatige intelligentie. Omdat het hoortoestel gezondheid in de gaten houdt noemt Starkey het ‘Healthable Hearing Technology’.

Het hoortoestel kent aan de fysieke en mentale activiteit van de drager via een app op de smartphone punten toe. De dragers van de Evolv AI worden zo proactief aangezet om hun welzijn en gezondheid te optimaliseren. Starkey noemt de Evolv AI een ‘healthable’: een apparaat dat zorgt voor goed horen en verstaan, maar daarnaast ook ondersteuning geeft om gezonder te leven.

Mocht de drager een keer ten val komen, dan wordt ook dít door het hoortoestel gedetecteerd en met in de smartphone voorgeprogrammeerd telefoonnummers automatisch alarm slaan naar een familielid of vriend.

De Amerikaanse fabrikant Starkey wil met de Evolv AI eenzelfde revolutie op het gebied van hoortoestellen realiseren als Apple heeft gedaan met de iPhone. Doordat Apple aan telefoons tal van functionaliteiten heeft toegevoegd is het aantal gebruikers van mobiele telefoons enorm toegenomen. Starkey hoopt dat het aantal hoortoestel dragers door de extra functionaliteiten, waaronder een Live vertaal functie en ‘tap control’ (tikken om bijvoorbeeld een telefoongesprek te activeren of muziek te pauzeren), ook toe gaat nemen. Het hoortoestel kan overigens met stemcommando’s bediend worden en herinneringen kan het hoortoestel laten horen. De fabrikant hoopt zo dat mensen door het dragen van de Evolv AI hoortoestellen ook gezonder oud worden. Hoortoestellen blijken namelijk in het algemeen te zorgen voor een betere mentale gezondheid. De Starkey Evolv AI draagt door de extra functionaliteiten daar extra aan bij. Daarnaast kan het hoortoestel nu automatisch 55 miljoen aanpassingen per uur uitvoeren om zo de beste en meest persoonlijke geluid te creëren. Verder is de Evolv AI voorzien van een nieuwe technologie die 40% reductie geeft van omgevingslawaai zodat het verstaan in drukke geluidssituaties meer moeiteloos gaat.

*Jeroen Douw over de
Starkey Evolve AI
hoortoestellen:*

*“Starkey Livio Edge AI
is een geweldig goed
hoortoestel, dat ook
nog eens de fysieke en
mentale activiteit
bijhoudt.”*

Opties en accessoires

- Leverbaar van onzichtbaar in het kanaal tot krachtige power achter-het-oor.
- Oplaadbaar ook als in-het-oor
- ‘Made for smartphone’: rechtstreeks draadloos telefoneren (met twee oren tegelijkertijd) en vanaf de iPhone 11 of nieuwer volledig handsfree met uw smartphone en oversturen van muziek. Voor sommige Android toestellen is een streamer nodig. Bij enkele Android telefoons is direct streamen mogelijk.
- Thrive app om zelf een aantal instellingen -zoals windruisonderdrukking, volume en klank- wijzigen in de hoortoestellen en deze koppelen aan uw gps-locatie.
- Afstandsbediening, geluid van tv en hifi streamen naar hoortoestellen.
- Externe (draadloze) microfoon om tijdens lezingen of rumoerige situaties de spreker goed te verstaan.
- Voor eenzijdig horenden heeft Starkey zogenaamde CROS-oplossingen. Door deze CROS-aanpassing wordt het geluid van het dove oor naar het betere oor gestreamd, zodat u het geluid toch weer van beide kanten kunt waarnemen.



Voor meer informatie: <https://www.starkey.nl>

Widex MOMENT™

Volgens Widex heeft hoortoestelindustrie decennialang – min of meer gedwongen – moeten accepteren dat een hoortoestel, hoe goed dit ook is, altijd klinkt als een hoortoestel. Bij Widex zijn ze bij de ontwikkeling van de Widex MOMENT gestart met het bereiken van een zo goed als mogelijk geluids aanbod in het oor. Met dat doel voor ogen heeft Widex een geheel nieuwe methode ontwikkeld om een optimaal hoortoestelgeluid te creëren. Deze nieuwe methode is terug te vinden in de nieuwe Widex MOMENT. Widex denkt daarmee een revolutionaire manier gevonden te hebben om het geluid te verwerken: een ultra-snel signaalpad met de naam ZeroDelay. Dit voorkomt onaangename artefacten wat volgens Widex voor het typische hoortoestelgeluid zorgt. Widex noemt deze nieuwe manier van geluidsverwerking WIDEX PureSound.

De Widex MOMENT is de tweede generatie Widex-hoortoestellen met machine learning (een vorm van kunstmatige intelligentie), die op grond van eerdere ervaringen kan voorspellen wat de geluidsvoorkeuren van de individuele gebruiker zullen zijn. Daarnaast worden de voorkeuren van de gebruikers anoniem gedeeld in de Widex-Cloud. Dit gebeurt overigens uitsluitend als de gebruiker daar toestemming voor geeft. De ingenieurs bij Widex hebben inmiddels meer dan een miljoen individuele programma's geanalyseerd en de gegevens gebruikt bij het ontwikkelen van de Widex MOMENT.

Het nieuwe Widex toestel is op het ogenblik leverbaar in vijf modellen: twee in-het-oortoestellen en drie achter-het-oortoestellen. Het meest in het oog springende model is daarbij de mRIC RD, een zeer klein oplaadbaar lithium-ion RIC-hoortoestel, dat bovendien rechtstreeks met veel smartphones kan worden verbonden.

Met iPhone hoortoestellen en iPad's is rechtstreekse communicatie mogelijk, voor bellen en muziek streamen vanaf een Android toestel is een streamer noodzakelijk. De bijbehorende app is doorontwikkeld op grond van eerdere gebruikerservaringen en is nog intuïtiever gemaakt. De app biedt veel mogelijkheden om het hoortoestel naar eigen wens in te stellen. De diverse DEX-accessoires kunnen ook communiceren met de toestellen uit de Widex MOMENT-serie.

Opties en accessoires

- De drager kan eigen luisterprogramma's maken wanneer hij/zij dat nodig is
- Direct streamen vanaf een iPhone of iPad
- Multifunctionele app voor iPhone. Deze werkt als afstandsbediening en biedt tevens o.a. een equalizer, de mogelijkheid om zelf luisterprogramma's toe te voegen, foto's toe te voegen, instructievideo's over hoortoestelonderhoud te bekijken en de mogelijkheid om de hoortoestelmicrofoons extra gevoelig te maken naar voren, opzij of naar achteren
- De app, en daarmee bovenstaande functies, is ook bruikbaar met veel Android-telefoons en EVOKE F2. Het streamen van telefoongesprekken, muziek e.d. is mogelijk met toevoeging van een COM-DEX (streamer)
- Een andere App (ToneLink) als afstandsbediening voor alle overige EVOKE-modellen en de F2
- Alle DEX-randapparatuur kan worden gecombineerd met de Widex EVOKE.

Productmanager

Richard Koelewijn

over de Widex

Moment:

*'De WIDEX MOMENT
biedt het meest natuurlijke
geluid dat in een
hoortoestel mogelijk is,
daar zorgt de ZeroDelay
voor'*



Voor meer informatie kijk op www.widex.nl